


お部屋の隅やすき間をお掃除するとき
掃除機の先端を付け替えませんか？

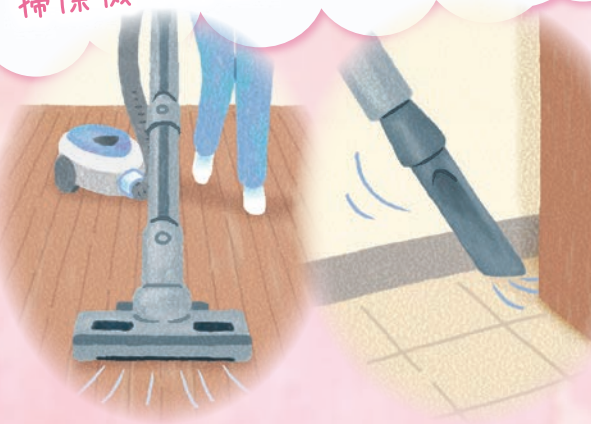

お口の中も同じです

全体は
歯ブラシ

歯ブラシ
でのブラッシング



すき間は
補助用具

フロスを
使うと



ルシェロ フロス ミントワックス

歯間に入れやすい、ワックスコートタイプ



内容量●30m
ケース色●4色:ピンク、グリーン、イエロー、パープル
希望患者価格●1個=¥330(税込)

ルシェロ フロス アンワックス

やわらかくプラーク除去力に優れたアンワックスタイプ



内容量●30m
ケース色●ホワイト1色
希望患者価格●1個=¥330(税込)

ルシェロ フロッサー

歯ブラシ感覚で手軽に使えるハンドル付デンタルフロス



内容●ハンドル(ピンク/グリーン) 1本、
フロスヘッド 7個(フロス太さ:M ホワイト/S イエロー)
材質●フロス:高強度PE、フロスヘッド:
PP、ハンドル:PP・TPR(熱可塑性ゴム)
耐熱温度●80℃
希望患者価格●1セット=¥530(税込)

ルシェロ フロッサー フロスヘッド

いつも清潔&エコ。毎日使っても1ヶ月使用できる付け替え用フロスヘッド



内容●フロスヘッド 30個(10個×3)
(フロス太さ:M ホワイト/S イエロー)
材質●フロス:高強度PE、フロスヘッド:PP
耐熱温度●80℃
希望患者価格●1箱=¥530(税込)

※掲載内容・希望患者価格は2022年12月現在のものです。
※印刷の都合上、実物と多少色・仕様が異なる場合がございます。
※無断転載・無断複製を禁じます。

発売元

株式会社 ジーシー お客様窓口 ☎0120-179418

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)

歯の健康についての情報満載のホームページ <https://www.gc.dental/japan/education/public>


詳しくは当院の歯科医師・歯科衛生士にご相談ください。

GC




なぜフロスが
必要なの？

歯と歯の間のお話

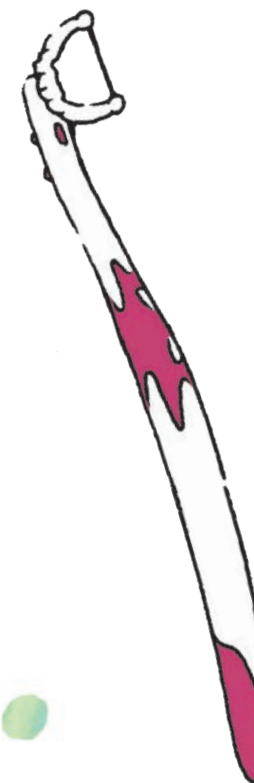

歯ブラシだけでは落とせない
汚れがあります。

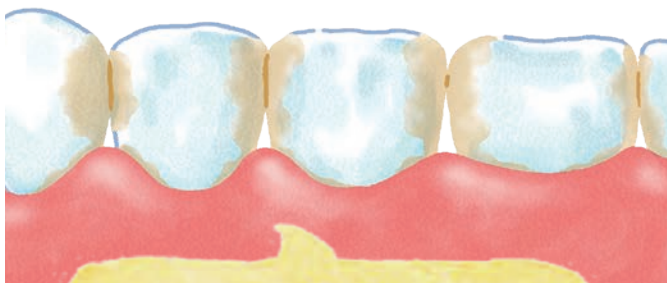

取り残した**プラーク**は

むし歯 **歯周病** の原因に!

大人も子どももみんな使える



セルフチェックにもなります!

いつも同じ所でひっかかる ▶ **むし歯の可能性**


出血する ▶ **歯肉に炎症がある可能性**

指巻きタイプ


ルシェロ フロス



優しくしっかり落とす
マイクロファイバー

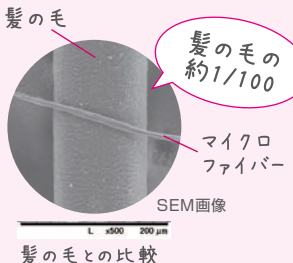

プラークをかきとる
くさび状繊維

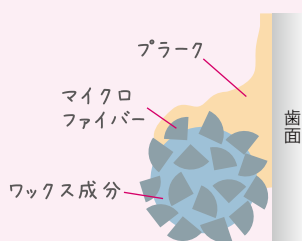

歯と歯の間に入れやすい
ワックスコーティング



持ち方



フロスを40cmほど(指先からひきまで)の長さでカットします。

両手中指(人差し指)にフロスを軽く数回巻きつけます。利き手と逆の手に多めに巻きつけましょう。

フロスをピンと張ったとき、両中指の間隔が10~15cmになるように調整します。

親指と人差し指でフロスを支え、間隔を1~2cmに保ちながら操作していきます。

上の歯の場合



親指と人差し指でフロスがピンと張るように持ちます。




親指を歯の前、人差し指を歯の後ろに入れ、歯と歯の間にのこぎりの刃を小さく引くようにゆっくりフロスを挿入します。

下の歯の場合



両手の人差し指でフロスを押さえ、ピンと張ります。

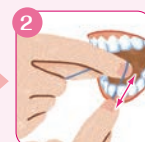

両方の人差し指を下に向け、歯と歯の間にのこぎりの刃を小さく引くようにゆっくりフロスを挿入します。

POINT



上から見ると「く」の字形になるように歯面にビタッと押しあてます。



歯の側面に沿わせながら、ゆっくりと上下させてすき、プラークをかき取ります。

※フロスが汚れたら、利き手の中指に使用済み部分を巻き取り、常に清潔な部分を使用しましょう。


ハンドルタイプ

ルシェロ フロッサー


前歯も奥歯も使いやすい
マルチアングル



奥歯まで届きやすい
ロングハンドル

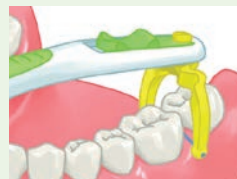


歯の側面にフィットする
適度なたわみ

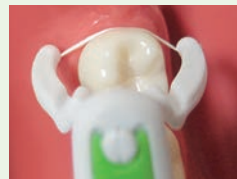

フロスヘッドの付け方



スライドロックが下りていることを確認してください。

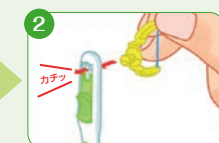

フロスヘッドを縦向きにカチッと音がするまで押し込みます。



スライドロックを止まるまで押し上げてフロスヘッドを確実に固定します。

確実にフロスヘッドを
ロックしてください。



しっかりロック




ロックされていない

フロスヘッドの外し方



フロスヘッドを縦向きにします。

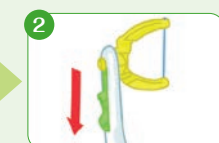

スライドロックを下ろします。



ハンドル後ろの突起を押し、フロスヘッドを下方向に倒しながら抜きます。

POINT

歯間への入れ方

のこぎりの刃を小さく引くように動かしながら歯間に通します。抜くときも同様に動かしながら抜きます。

動かし方

歯の側面に沿わせながら上下させてプラークをかき取ります。

