

ジーシー インナーフレーム LC

マウスガード補強材



Since 1921
100 years of Quality in Dental

H&S型マウスガード (断面イメージ)

インナーフレーム LC
(衝撃分散)

EVA (外側) EVA (内側)

衝撃 → 歯


スペース
(衝撃吸収)

ハード&スペース
H&S型マウスガード
の製作に

ハード&スペース型マウスガードとは、2層構造のマウスガードに補強材と空間を適切に配置し衝撃を分散・吸収することにより、高い保護効果を発揮するものである。

マウスガードの耐衝撃性能を高める マウスガード補強材

■成形した1層目のマウスガード (EVA) 上に、任意にカットしたインナーフレーム LC を配置・5分間の光重合後、2層目のシート材 (EVA) を積層する。

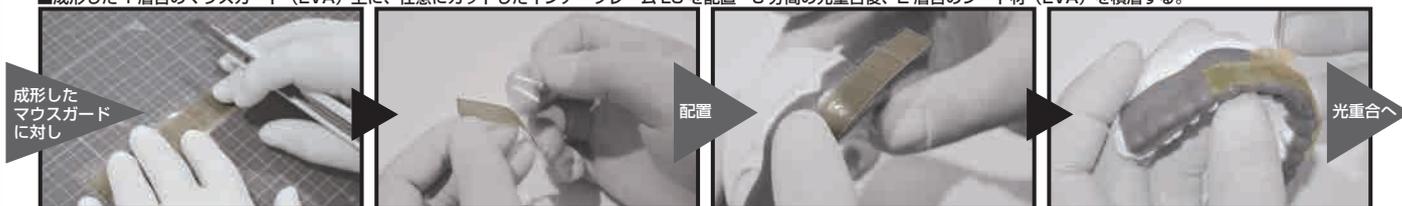

- ベタつかず成形しやすいシート状、均一な厚み (120mm × 20mm 厚さ1mm)
- 極めて高い衝撃分散・吸収能を発揮
- 作業しやすい光重合型レジン材料 (歯科技工用光重合器 5分)
- 操作余裕時間 20分 (室内光下目安)

マウスガード補強材

ジーシー インナーフレーム LC

色 調 ● 1色-クリア
サイズ ● 120×20mm (厚さ:1mm)
包 装 ● 1歯:5枚 (1枚×5袋)

ご使用に際しましては、必ず使用上の注意事項をお読みください。

※掲載情報は2022年12月現在のものです。

※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。 ※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎ **0120-416480**
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支 店
● 東 京 (03)3813-5751 ● 大 阪 (06)4790-7333
営業所
● 北海道 (011)729-2130 ● 名古屋 (052)757-5722
● 東 北 (022)207-3370 ● 九 州 (092)441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー
公式アプリ



どちらもコチラのQRでOK!
推奨OS/バージョンはiOS:13.7以上、Android:9.0以上です。